




ERMITTELN DER  
**PERFEKTEN GRÖSSE**

Leitfaden zum Messen und  
Auswählen der richtigen Größe ihres  
Neoflex Positionierungssystems.

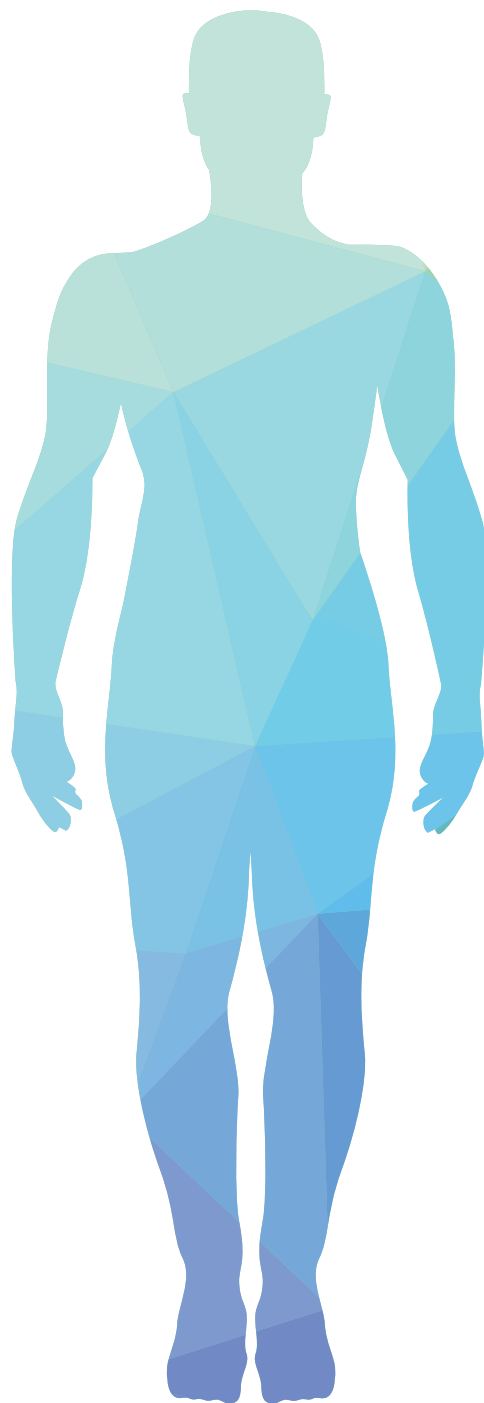

## Neo 00 Universell

- Neo 00.01**      Universalband
- Neo 00.02**      Universalband-Verlängerung

## Neo 20

- Neo 20.01**      Brustgurt - breit
- Neo 20.02**      Brustgurt mit Reißverschluss - breit
- Neo 20.03**      Brustgurt - schmal
- Neo 20.04**      Brustgurt mit Reißverschluss - schmal
- Neo 20.05**      Schultergeschirr
- Neo 20.06**      Verbundenes Schultergeschirr
- Neo 20.07**      Brustgurt

## Neo 30

- Neo 30.01**      2 Punkt Hüftgurt
- Neo 30.02**      4 Punkt Hüftgurt
- Neo 30.03**      Abduktionsgurt


## Neo 40

- Neo 40.01**      Wadenband
- Neo 40.02**      Knöchelfixierung

Neo 20

Neo 30

Neo 40

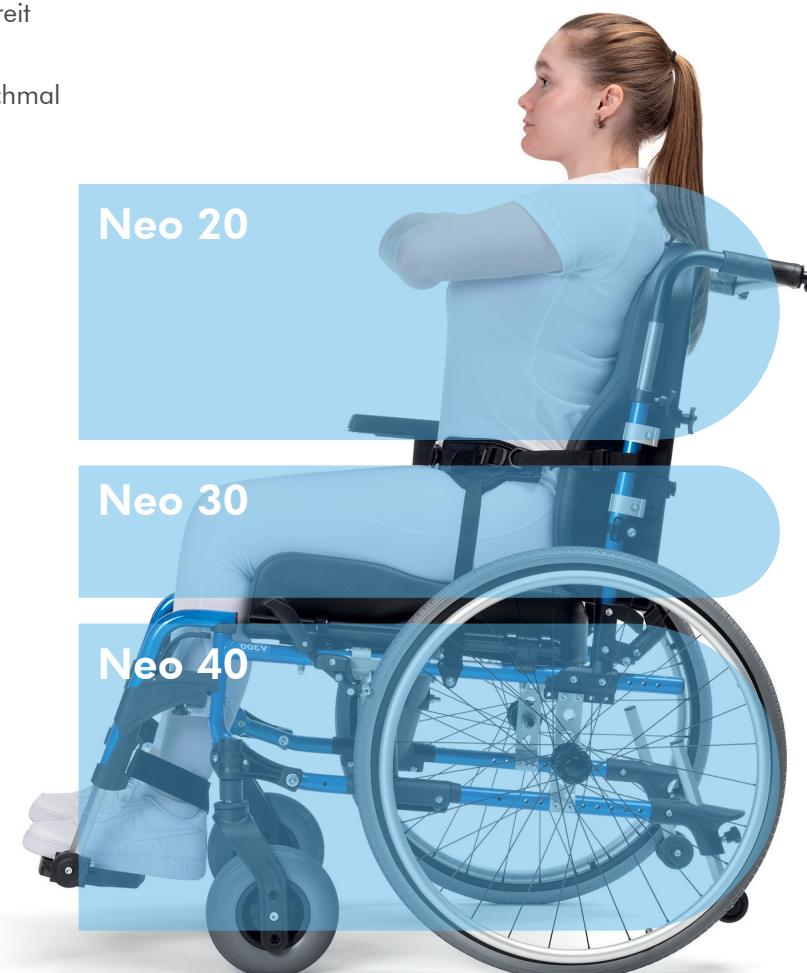

# WIE MESSEN?

**Neo 00.01** Universalband

**Neo 00.02** Universalband-Verlängerung



Messen Sie den gesamten Umfang der Brust mit Rückenlehne, addieren Sie zusätzlich 15 bis 20 cm und vergleichen das Maß mit den Werten der untenstehenden Tabelle, um die richtige Größe zu ermitteln.



A	Größe
<80 cm	S
80-120 cm	M
121-140 cm	L
141-160 cm	XL

# WIE MESSEN?

**Neo 20.01** Brustgurt - breit

**Neo 20.02** Brustgurt mit Reißverschluss - breit

**Neo 20.03** Brustgurt - schmal

**Neo 20.04** Brustgurt mit Reißverschluss - schmal



**Messen Sie die Brustbreite unter den Armen** und vergleichen das Maß mit den Werten der untenstehenden Tabelle, um die richtige Größe zu ermitteln.



B	Größe
>24 cm	XS
25-26 cm	S
27-32 cm	M
33-39 cm	L
40-46 cm	XL



# WIE MESSEN?

**Neo 20.05** Schultergeschirr

**Neo 20.06** Verbundenes Schultergeschirr



**Messen Sie die gesamte Länge von der Schulter Spitze bis zum unteren Teil des Ellbogens** und vergleichen das Maß mit den Werten der untenstehenden Tabelle, um die richtige Größe zu ermitteln.



A	Größe
25-30 cm	S
31-37 cm	M
38-40 cm	L
41-45 cm	XL

# WIE MESSEN?

**Neo 30.01** 2 Punkt Hüftgurt

**Neo 30.02** 4 Punkt Hüftgurt




**Messen Sie die Beckenbreite** und vergleichen das Maß mit den Werten der untenstehenden Tabelle, um die richtige Größe zu ermitteln.

A	Größe
25-33 cm	XS
31-40 cm	S
39-52 cm	M
48-65 cm	L

# WIE MESSEN?

## Neo 30.03 Abduktionsgurt

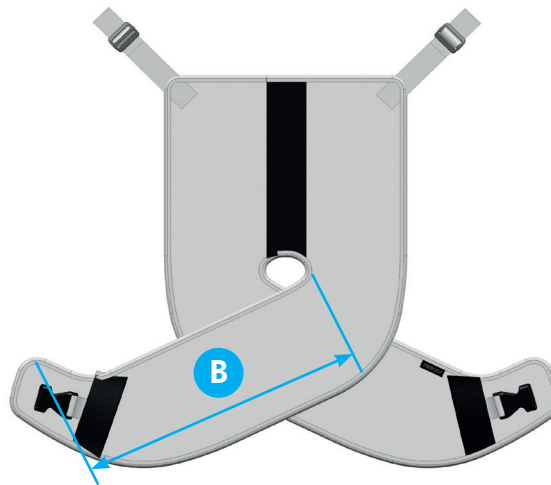

Messen Sie den Abstand von der Sitzoberfläche bis zum äußeren Ende des Oberschenkels, wie in der Abbildung gezeigt, und vergleichen das Maß mit den Werten der untenstehenden Tabelle, um die richtige Größe zu ermitteln.

B	Größe
17-24 cm	XS
24-26 cm	S
27-32 cm	M
33-38 cm	L

# WIE MESSEN?

## Neo 40.01 Wadenband

Messen Sie den Abstand zwischen den Hauptrohren der Fußstützen und vergleichen das Maß mit den Werten der untenstehenden Tabelle, um die richtige Größe zu ermitteln.



A	Größe
18-24 cm	S
25-32 cm	M
33-40 cm	L
40-50 cm	XL



# WIE MESSEN?

## Neo 40.02 Knöchelfixierung für beide Füße

**Messen Sie den Umfang des Fußknöchels** und vergleichen das Maß mit den Werten der untenstehenden Tabelle, um die richtige Größe zu ermitteln.



Größe	
14-17	XS
17-20	S
19-23	M
22-29	L
28-33	XL

