

Forest 3

Elektrorollstühle



VERMEIREN
we care for you

Forest 3

SICHER UND KOMFORTABEL FAHREN

Der Forest 3 ist bekannt für sein Achsensystem und ermöglicht seinem Benutzer ein sicheres und komfortables Fahren auf verschiedenen Untergründen. Mit dem Forest 3 überwinden Sie Hindernisse im täglichen Leben mit Leichtigkeit. Ein Rollstuhl, der für Erlebnisse in und außerhalb des Hauses gemacht ist.



KOMPAKT UND LEICHT ZU MANÖVRIEREN

Die kleine und kompakte Größe des Forest 3 ermöglicht einen reibungslosen Wenderadius. Perfekt für den Einsatz in Innenräumen oder im Alltag. Dank des kleinen Rahmens können Sie sich problemlos in kleinen und engen Räumen oder Gängen bewegen. Obwohl er kompakt ist, sieht er großartig aus!

ELEKTROLLSTUHL MIT UNENDLICHEN MÖGLICHKEITEN

Mit mehr als 20 Farbvarianten, einer großen Anzahl von Optionen und Anpassungen... kann der Forest 3 an jeden Fahrer und seine Vorlieben angepasst werden. Obwohl jeder Forest anders ist, bleiben die Qualität und die Haltbarkeit konstant. Jede Benutzergeschichte ist einzigartig und wir passen unseren Stuhl gerne an die Ihre an!



Forest 3

ELEKTOROLLSTÜHLE
HMV-Nr.: 18.50.04.0212



Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.



Scanne den QR-Code und sieh dir den Forest 3-Film an.

Kompakt, langlebig und leistungsstark. Der Forest 3 verfügt über die besten Eigenschaften für Benutzer, die einen kompakten Elektrorollstuhl suchen, der für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Der Forest 3 vereint Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit und verfügt über ein durchdachtes Design, daß unser gesamtes Know-how aus mehr als 55 Jahren vereint. Die Vorderradachse ist ein unbestreitbarer Vorteil für einen Elektrorollstuhl.


Hauptmerkmale



Option SE43 elektrische Sitzverstellung 50°

Sie garantiert einen konstanten Kontakt der 4 Räder mit dem Boden und bleibt dabei stabil und komfortabel. Die V-Stab-Technologie (optional) ermöglicht es dem Fahrer, auch in unwegsamem Gelände oder bei Hindernissen einen geraden Kurs zu halten, ohne ständig ausgleichende Lenktechniken anwenden zu müssen.

Mit seiner vorgeformten Rückenlehne und den individuellen Anpassungen bietet der Forest 3 eine personalisierte Lösung.

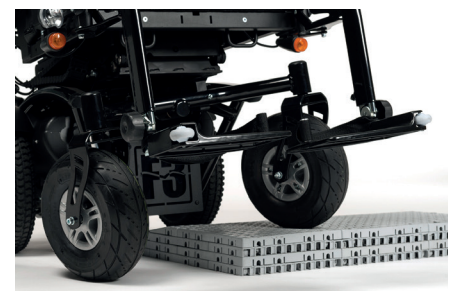

Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt



Verstellbare und klappbare Armlehnen mit Memory-Position



OPTIONEN Forest 3



B66MAL
Hemiplegie Armauflage



PU-Armlehne



Armlehnen mit Kunstlederbezug



Armlehne mit Softbezug



B06
manuelle Standard Beinstützen



BZ8 manuelle höhenverstellbare Beinstützen



BZE elektrisch höhenverstellbare Beinstützen



L34 geformter Rücken (soft)



L35 geformter Sitz (soft)



L16 + L35 Holzplatte mit Klettverschluss



TUB + L34 Rohrrückenlehne mit vorgeformtem Kissen, verstellbar durch Aluklemmen



TUB + L44 Rohrrückenlehne mit anpassbarem Kleit Rücken



SE53 abschwenkbare Halterung für Steuerung



S53A abschwenkbare Halterung mit Verriegelungspositionen für Steuerung



S53Z abklappbare Halterung für Steuerung



SE02 im Tisch integrierte Steuerung



LINX LCD Elektronische Anzeige



SE04 Softball für Joystick



SE08 Haltevorrichtung für zusätzliche Steuerung



SE09 Zusätzliche Steuerung für Begleitperson

Varianten

Forest 3+

Kompakt, solide und effizient. Der FOREST 3+ ist der ideale Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Rollstuhl für den Innenbereich und gleichzeitig ein leistungsstarkes Modell für den Außenbereich suchen. Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit sind die Hauptmerkmale des FOREST 3+.



Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine passende Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	595 / 610 / 630 / 650 mm
■ Gesamtlänge	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Gesamthöhe	1036 mm
■ Sitzhöhe	430 - 480 mm
■ Sitzbreite	400 / 420 / 450 / 480 / 500 mm
■ Sitztiefe	420 - 520 mm



Forest 3 SU

Der Forest 3 SU ist ein Elektrorollstuhl mit einer Aufstehmöglichkeit. Genau wie sein Bruder, der Forest 3, aber mit zusätzlichen Funktionen. Er ist mit einem Sicherheitsgurt auf Brusthöhe und einem gepolsterten Knieschutz ausgestattet, der für absoluten Komfort und Sicherheit sorgt.



Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt **Forest 3** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 220W oder 350W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h oder 10 km/h
■ Reichweite*	42 oder 50 km
■ Gewicht	139 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	 

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland

www.vermeiren.de
info@vermeiren.de



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**